



Кресла гинекологические

**FG-05.0**  
**FG-07.0**



## Кресла гинекологические

# FG-05.0 FG-07.0

### Назначение

Кресла гинекологические FG-05.0 FG-07.0 предназначены для поддержания пациентки во время проведения гинекологических осмотров и процедур. Также могут использоваться для урологических осмотров и процедур.



Кресло FG-05.0 с опорами для ступней без регулировки длины дуги WF-36.0



Кресло FG-07.0 с подлокотниками и подколениками WF-42.0



Кресло FG-05.0 с подлокотниками и подколениками WF-42.0



Кресло FG-07.0 с секцией голени WF-22.2

### Стандартная конструкция

- Несущая конструкция кресел покрыта порошковой краской и закрыта кожухами из пластмассы ABS
- Высота сиденья кресла FG-05.0 регулируется гидроцилиндром при помощи ножного рычага
- Высота сиденья кресла FG-07.0 регулируется электроприводом на номинальное напряжение 24 В DC с помощью ножной панели управления
- Регулировка наклона спинки, сиденья и наклонов Тренделенбурга и Антитренделенбурга осуществляется бесступенчато с помощью пневмопружины с блокировкой
- Кресла имеют: бесшовную обивку, гинекологический лоток из нержавеющей стали, рулон гигиенических простыней, расположенный на кронштейне за спинкой, а также рельс для крепления аксессуаров в сиденье

### Преимущества кресел FG-05.0 и FG-07.0

- Обеспечивает полную безопасность пациентки
- Электропривод в кресле FG-07.0 уверенно и без усилий со стороны обслуживающего персонала позволяют получить и поддерживать нужную высоту кресла
- Гидроцилиндр в кресле FG-05.0 точно и уверенно обеспечивает достижение и поддержание требуемой высоты кресла
- Пневмопружины с блокировкой помогают регулировать спинку, сиденье и наклоны Тренделенбурга и Антитренделенбурга и гарантируют стабильное поддержание заданного положения секций
- Возможность выбора цвета обивки из широкой палитры цветов
- Бесшовная обивка и формы кожухов помогают поддерживать кресла в чистоте
- Используемые материалы устойчивы к воздействию чистящих средств
- Благодаря богатому оснащению пользователь может выбрать для себя оптимальную версию кресла

### Предлагаемое оборудование

- Опора для стопы без регулировки длины дуги WF-36.0
- Упор для руки с подколеником WF-42.0
- Подставка (ступенька из ламинированной плиты) WF-03.5

- Подставка (ступенька с обивкой) WF-03.3
- Стремя для ноги WF-23.0
- Сегмент голени WF-22.2
- Инфузионная стойка WK-01.5
- Опора для руки WS-07.5
- Урологический лоток WF-52.0



Урологический лоток WF-52.0 (опция)



Гигиеническая бумажная простынь



Стремя WF-23.0 (опция), установленное на кронштейне подколеника



Подставка WF-03.5 (опция) Подставка с обивкой WF-03.3 (опция)

## Технические характеристики

### FG-05.0

### FG-07.0

Общая длина ложа в горизонтальном положении:

- с секцией голени
- без секции голени

1740 мм  
1275 мм

1740 мм  
1275 мм

Общая ширина ложа

780 мм

780 мм

Ширина ложа (обивка)

560 мм

560 мм

Регулировка высоты сиденья (в положении кресла)

от 720 до 1030 мм

от 660 до 1060 мм

Угол подъема спинки

70°

70°

Диапазон регулировки угла наклона сиденья

-14° до +18°

-14° до +18°

Положение Тренделенбурга

18°

18°

Положение Антитренделенбурга

14°

14°

Питание

-

230 В~, 50/60 Гц

Максимальное потребление мощности

-

300 VA

Класс защиты от поражения электрическим током

-

II

Тип рабочей части

-

B

Степень защиты от воздействия окружающей среды

-

IP-X1

Допустимая нагрузка

175 кг

175 кг

Объем гинекологического лотка

9 л

9 л



**Famed Żywiec Sp. z o.o.**  
ul. Fabryczna 1  
34-300 Żywiec, Poland

**Head Office:**

tel.: +48 33 866 62 00

fax: +48 33 475 58 90

**Export Department:**

tel.: +48 33 866 62 58

tel.: +48 33 866 62 65

tel.: +48 33 866 62 66

fax: +48 33 861 46 78

expo.famed@famed.com.pl

www.famed.com.pl



Функции кресел, регулируемые при помощи ножной панели управления (FG-07.0) и ножного насоса (FG-05.0)




FG-05.0: 720 до 1030 мм


FG-07.0: 660 до 1060 мм




Функции кресла, регулируемые вручную

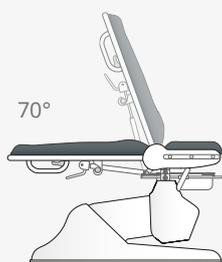

70°

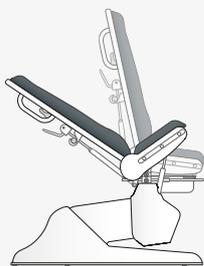

-14° до +18°

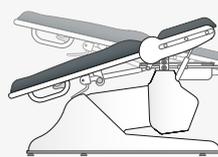

14°



Продукт соответствует требованиям Европейской директивы MDD 93/42 /ЕЭС в отношении обеспечения безопасности медицинских изделий.

Издание 06/2015/01. Компания оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в изделие небольшие изменения, связанные с развитием научно-технического прогресса



www.famed.ru