



Каталка для
перевозки больных

WP-09



Каталка для перевозки больных

WP-09

Назначение

Каталка WP-09 предназначена для перевозки больных в операционные и процедурные залы. Каталка также позволяет использовать рентгеновский аппарат с С-дугой для контроля пациента.



Совместная работа с С-дугой.



Версия каталки с 4-х секционным ложем.



Положение Тренделенбурга.

Стандартная конструкция


- Ложе каталки рентгенопрозрачное. Благодаря возможности установки под ложем держателя R-кассеты (опция) рентгеновские снимки можно делать по всей длине ложа.
- Каталка изготовлена из стальных профилей, покрытых порошковой полиэфирно-эпоксидной краской цвета RAL 9002, устойчивой к истиранию и действию дезинфицирующих средств.
- Спинная секция в каталках и секция бедра в каталке с 4-х секционным ложем регулируются при помощи пневмопружины с блокировкой. Регулирование секции голени в 4-х секционном ложе осуществляется с помощью храпового механизма.
- Изменение высоты ложа и продольных наклонов осуществляется при помощи гидроцилиндров, управляемых ножным приводом с помощью рычага.
- Основание каталки закрыто кожухами из пластика ABS цвета RAL 9002.
- На кожухе основания можно поместить кислородный баллон.
- Каталка имеет матрас и корзину для личных вещей пациента. Роликовые бамперы, закрепленные в углах ложа, защищают его от повреждений.

Преимущества каталки

- Диапазон регулировки позволяет регулировать высоту ложа каталки, как до высоты ложа больничной кровати, так и до высоты столешницы операционного стола.
- Каталка оснащена механизмом центральной блокировки четырех колес, опционно можно установить пятое колесо.
- Одно из колес является направляющим, для прямолинейного движения.
- Большой диаметр колес (200 мм) делает каталку маневренной и легко управляемой.
- Быстро снимаемый торец со стороны головы пациента.

Дополнительное оснащение

- Боковые ограждения
- Инфузионные стойки
- Ремень для фиксации пациента
- Держатель R-кассеты
- Пятое колесо

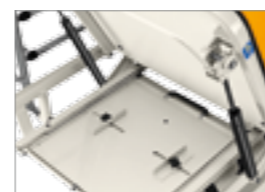

Подвижный держатель R-кассеты WW-24.0 на направляющих под ложем позволяет делать рентгеновские снимки по всей длине ложа.



Ремень WW-12.0 для фиксации пациента.



Боковые ограждения крашенные РВ-15.5.




Пятое колесо WW-25.0.



Боковые ограждения хромированные РВ-15.6.



Инфузионная стойка WK-06.0.

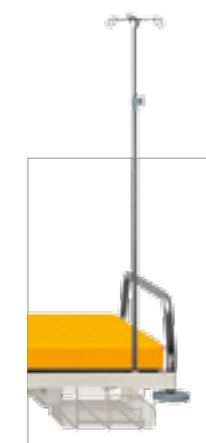

Инфузионная стойка WK-16.0.

Famed Żywiec Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1
34-300 Żywiec, Poland

Head Office:

tel.: +48 33 866 62 00
fax: +48 33 475 58 90

Export Department:

tel.: +48 33 866 62 58
tel.: +48 33 866 62 65
tel.: +48 33 866 62 66
fax: +48 33 861 46 78

export@famed.com.pl
www.famed.com.pl



Изделия соответствуют требованиям Европейской директивы MDD 93/42/ЕЕС в отношении медицинских изделий и Закона о медицинских изделиях.

Издание: 08/2015/02. Сохраняется возможность введения модификаций в связи с техническим прогрессом.

